

AMÉLIORE LE
DÉVELOPPEMENT DU
VISAGE ET DES DENTS
Denture mixte



A UTILISER
UNE HEURE
LE JOUR
ET EN
DORMANT

T4K®

LE
TRAINER
PRE-ORTHODONTIQUE POUR ENFANTS

www.myobrace.com

BREVETS MONDIAUX, POUR PLUS D'INFORMATION ALLEZ À MYORESEARCH.COM

MODE D'EMPLOI

UTILISEZ LE T4K® UNE HEURE LE JOUR ET LA NUIT EN DORMANT

Portez le T4K® en faisant vos devoirs, en lisant, en regardant la télé, devant votre ordinateur ou en jouant.

Vos dents antérieures pourront devenir légèrement sensibles au début. C'est normal, mais si la sensation devient excessive, diminuez le temps de port du T4K®, puis ré-augmentez-le quand la sensibilité est passée.


NE MÂCHOUILLEZ PAS LE T4K®



Etape 1 : Tenez le T4K® languette linguale vers le haut.



Etape 2 : Placez le T4K® dans votre bouche.

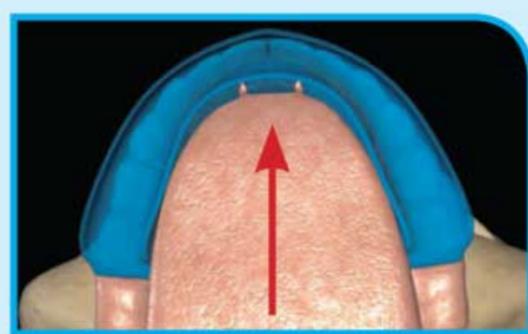

Etape 3 : Gardez la langue sur la languette linguale.




Etape 4 : Fermez la bouche sur le T4K® et sentez-le travailler pour aligner vos dents antérieures et vos mâchoires.



Etape 5 : Gardez les lèvres jointes et respirez par le nez.

Votre praticien pourra modifier ces instructions en fonction du plan de traitement.

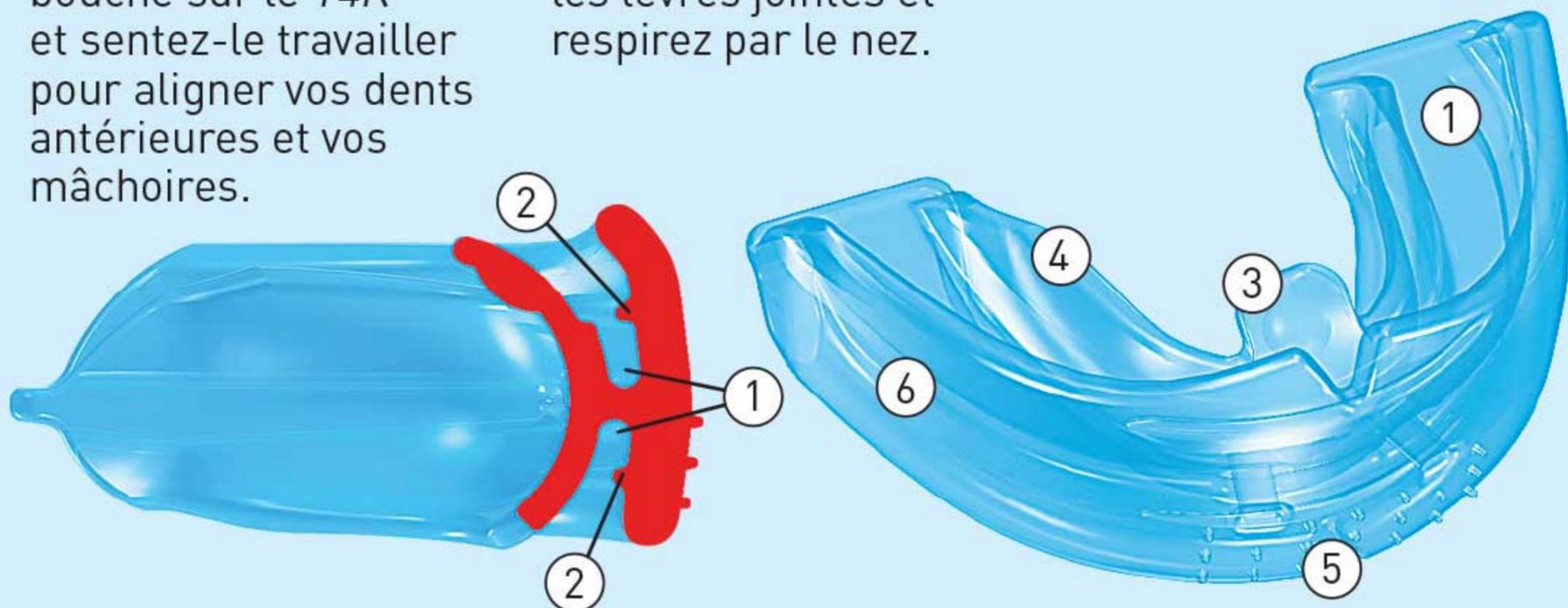

Portez le T4K® en faisant vos devoirs, en lisant, en re

ASTUCES TRAINER POUR LES PARENTS

- Si le *T4K*[®] tombe à cause de poussées linguales ou de la respiration buccale, l'enfant doit persévérer dans le port nocturne. Les mauvaises habitudes doivent être corrigées et, une fois que le *T4K*[®] reste en place toute la nuit, votre enfant a gagné.
- La bouche de l'enfant doit rester fermée la plupart du temps : insistez sur le fait de garder les lèvres jointes quand le *T4K*[®] est en place. Quand le *T4K*[®] n'est pas en bouche, les lèvres doivent être en contact léger et l'enfant doit respirer par le nez.
- Rappelez à l'enfant de placer le bout de sa langue sur la position approximative de la languette linguale même lorsqu'il n'utilise pas le *T4K*[®].
- Utilisez pendant un minimum de six à douze mois.
- Si le port nocturne n'est pas possible, augmentez le port diurne.
- Attendez-vous à voir des modifications dentaires sous trois mois si la coopération est bonne. Mais vous devriez voir une amélioration des fonctions rapidement (respiration nasale et moindre activité musculaire lors de la déglutition).

CARACTERISTIQUES DU T4K[®]

GUIDAGE DENTAIRE

Moulé sur l'avant du *T4K*[®]
(fonction similaire à un arc orthodontique).

- ① **Gouttières dentaires.**
- ② **Les gouttières d'alignement** exercent des forces légères sur les dents antérieures mal alignées.

MYOFUNCTIONAL EFFECT™

- ③ **La languette linguale** aide à établir la position correcte du bout de la langue.
- ④ **La cage à langue** empêche les poussées linguales et encourage l'enfant à respirer par le nez.
- ⑤ **Le lip-bumper** réprime l'hyperactivité musculaire de la lèvre inférieure.

DÉVELOPPEMENT DE LA MÂCHOIRE

- ⑥ **La base en aile d'avion** aide au développement des mâchoires. La position correcte de la mâchoire est atteinte par la prévention de la respiration buccale et des postures linguales.

gardant la télé, devant votre ordinateur ou en jouant.

MODE D'EMPLOI

Le Trainer Pre-Orthodontique pour Enfants (T4K®) fait partie de *The Trainer System™* de *Myofunctional Research Co.*

Les mauvaises habitudes myofonctionnelles comme une position et une fonction incorrectes de la langue, plus une respiration buccale, sont souvent à l'origine d'un mauvais alignement dentaire et d'un mauvais développement de la mâchoire.

Le *Myofunctional Effect™*

Tous les appareils de *The Trainer System™* sont conçus pour rééduquer la musculature buccale. Ce qui aide à la correction de l'alignement des dents et des mâchoires.

Si elles restent sans traitement, les habitudes myofonctionnelles comme la respiration buccale, la déglutition incorrecte et les postures linguales compromettront le développement de la face et toute orthodontie ultérieure.

Le T4K® est spécifiquement conçu pour le traitement en denture mixte, lorsque les dents permanentes sont en éruption et que l'enfant est toujours en croissance.

Nettoyage de votre T4K® : Nettoyez votre T4K® sous l'eau courante chaude chaque fois que vous le retirez de votre bouche. Utilisez les tablettes *Myoclean™* pour le nettoyer à fond deux fois par semaine. Parlez à votre praticien de *Myoclean™*, l'agent nettoyant recommandé pour tous les appareils MRC.

ATTENTION : N'UTILISER QUE SOUS LA SUPERVISION D'UN ORTHODONTISTE OU D'UN DENTISTE

Durée de vie : 6 mois sur la base d'un port quotidien.
Remplacez au bout de 12 mois, quel que soit le temps de port.



The Trainer System™ par Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia:
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Représentant aux USA:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1 866 550 4696



Représentant en Europe:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

Usage unique



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION**



NE PAS EXPOSER
DIRECTEMENT À
LA LUMIÈRE DU SOLEIL.



NETTOYEZ
AVANT
USAGE

Trainer_T4K_INS_0419_FRE_V1.0.2