

Promotions valables  
jusqu'au 31/12/2018

# Ortho@deal

Vous donne le sourire

La céramique au prix du métal



le bracket  
à partir de  
**1,75€**



NEW **myobrace**<sup>®</sup>



**B<sub>2</sub>**



**k<sup>1</sup>**  
Broad

Onyx Bracket



~~5,80€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**2,90€<sup>ttc</sup>**

Promim SL Tube



~~14,80€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**7,40€<sup>ttc</sup>**

Beryl Bracket



~~7,80€<sup>ttc</sup>~~

**PROMO**

**3,40€<sup>ttc</sup>**

Pour nous contacter : 01 47 82 09 48

# TUBE AUTO LIGATURANT PROMIM SL



Ce tube de conception MIM vous apportera confort, solidité et fiabilité durant vos traitements.

Très simple à ouvrir et à fermer et cela aussi souvent que nécessaire, il facilitera la prise en charge des deuxièmes molaires.

- Changement facile de l'arc
- Ouverture occlusale et fermeture gingivale
- Petit Crochet recourbé pour éviter les irritations gingivales
- Forme arrondie et douce pour un confort optimal du patient
- 80# mesh base et profil ultra plat
- Torque et ancrage optimisés


PRIX SPECIAL

~~14,80€~~ ttc

**-50%**

**7,40€** ttc  
pce

# BRACKET METAL MUSTANG

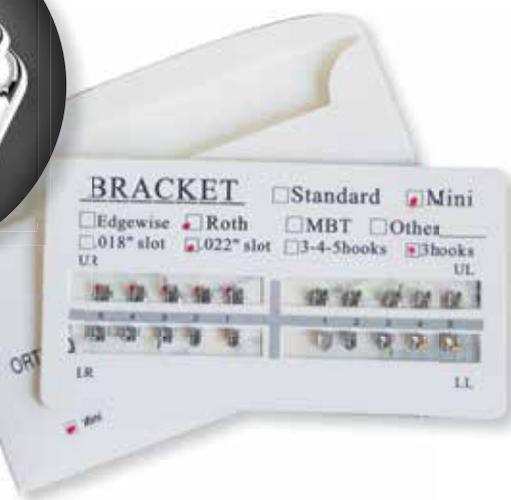

- Full control
- Profil ultra plat- Low profile
- Bracket Mesh base
- Rétenion maximum
- Bracket forme rhomboïde
- Base anatomique
- Torque dans la base
- Crochet boule
- Code couleur

PRIX SPECIAL

~~2,55€~~ ttc

**PROMO**

**0,99€** ttc  
pce

**PROMO**

JUSQU'À 10 CAS COMPLET - 40 % SOIT

**1,53€** ttc  
le bracket

DE 10 À 99 CAS COMPLET - 50 % SOIT

**1,28€** ttc  
le bracket

A PARTIR DE 100 CAS

**PROMO**

**0,99€** ttc  
le bracket

# LE MEILLEUR TUBE AU MEILLEUR PRIX

Le design, le confort *Cobra* LOW PROFILE TUBE

**PROMOTION TUBE**  
~~6,28€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
**3,14€<sup>ttc</sup>**  
pce



**Et aussi, le Micro Tube**



Spécialement conçu pour la 2<sup>ème</sup> molaire partiellement incluse, parfait pour le collage au niveau de la cuspide mésiale.

Pour toute commande supérieure ou égale à 80 tubes :



**UNE PRECELLE À TUBE EST OFFERTE**

**Valeur : 60€**



Marquage du sillon



Guide de positionnement pour faciliter le collage

**A partir de 400 tubes achetés**

**-60%**

**2,51€<sup>ttc</sup>**  
pce

**Promotion Tube**

~~6,40€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**3,20€<sup>ttc</sup>**  
pce

## *Cobra 2* LOW PROFILE



**Et aussi, en 2<sup>ème</sup> Molaire**



**Base mesh 80**



Encoche Sillon

# 100% ESTHÉTIQUE

## SAPHIR ABSOLUTE

~~14,10€<sup>ttc</sup>~~

**PROMO**

**7,05€<sup>ttc</sup>**

### Venez découvrir notre nouveau Bracket Mono-crystal

- Une transparence totale,
- Une absence de coloration,
- Une base galbée en harmonie avec l'anatomie de la dent, évite l'effet de bascule,
- Une épaisseur réduite au maximum pour un meilleur confort du patient et de travail,
- Base 100% mécanique,
- Polissage complet du Bracket avec contours lisses.

## QUAND RÉSISTANCE RIME AVEC TRANSPARENCE

### Le Bracket Absolute,

c'est la fiabilité issue des dernières technologies.

#### Caractéristiques

- Pas d'usure dans le temps
- Chimiquement neutre
- Compatible avec toutes les teintes
- Code couleur d'identification
- Marquage slot
- Excellent design pour un meilleur confort

#### Traitement de la base

- Torque dans la base
- Traitement de la base par RMM (projection d'Alumine)
- Base mécanique à 100%
- N'altère pas l'émail
- Compatible avec tous les adhésifs du marché
- Facile à déposer



# PRENEZ LE MEILLEUR AVEC LA PERFORMANCE & L'INNOVATION

Bracket Céramique

# DIAMANT



Le bracket, à partir de  
~~6,51€<sup>ttc</sup>~~  
**Promo**  
**3,25€<sup>ttc</sup>**  
 le bracket

Un bracket céramique petit et confortable, hautement translucide, pratiquement invisible avec un glaçage sur la surface afin d'améliorer l'esthétisme et le confort en bouche.

- Une faible épaisseur, un glaçage
- Une très haute transparence
- Une base mécanique à 100% et une dépose très facile
- Contours des plots ronds et lisses pour un confort optimal en bouche
- Vendu sur plaquette individuelle ou en sachet (par 10)
- Disponible en Roth 18 ou 22

DE 0 À 10 CAS -40%

**3,91€<sup>ttc</sup>**  
le bracket

DE 11 À 50 CAS -45%

**3,58€<sup>ttc</sup>**  
le bracket

+ DE 50 CAS COMPLET  
ou 1000 brackets


**3,25€<sup>ttc</sup>**  
le bracket

## LE BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT AU PRIX DU MÉTAL

Vendu par cas complet, nous vous offrons au prix du métal les brackets céramique de 13 à 23. Une présentation sur plaquette (format carte de crédit), dispo en 0,18 et 0,22.

**1,95€<sup>ttc</sup>**  
le bracket

■ PRIX POUR 10 CAS COMPLETS  
incluant céramique de 3 à 3 supérieur

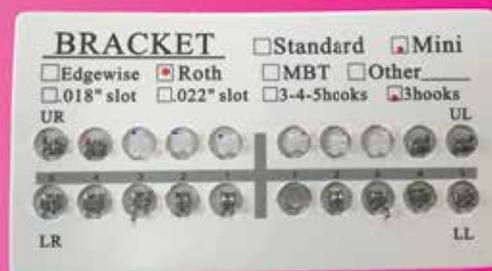

Les cas se composent de :


- Boîtier métal Micro Orthodeal
- De canine à canine Sup : Nouveaux brackets céramique Diamant

**1,75€<sup>ttc</sup>**  
le bracket

■ PRIX POUR 30 CAS COMPLETS  
incluant céramique de 3 à 3 supérieur

# AUXILIAIRES

## ■ STOPS à sertir paquet de 10

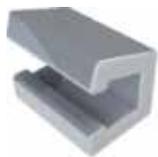

~~32,55€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
16,27€<sup>ttc</sup>

## ■ CROCHETS à sertir paquet de 10



~~32,55€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
16,27€<sup>ttc</sup>

## ■ CHAINETTE or Vendue par paquet de 2



~~32,55€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
16,27€<sup>ttc</sup>

## ■ CROCHETS à sertir courbe (droit et gauche) paquet de 10



~~32,55€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
16,27€<sup>ttc</sup>

## ■ BOUTONS à coller pour traction paquet de 10



~~32,55€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
16,27€<sup>ttc</sup>

## ■ BOUTONS à coller paquet de 10




~~32,55€<sup>ttc</sup>~~  
**-50%**  
16,27€<sup>ttc</sup>

## ■ BOUTONS en céramique paquet de 10



~~25€<sup>ttc</sup>~~  
**-40%**  
15€<sup>ttc</sup>

## ■ COIL SPRING ressort fermé paquet de 10

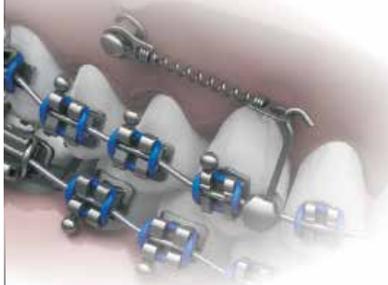

~~43,26€<sup>ttc</sup>~~  
**-30%**  
30,28€<sup>ttc</sup>


3 tailles : medium force  
• 6 mm, 9 mm, 12 mm

## ■ RESSORT A DISTALER LES MOLAIRES

- Facile à utiliser sur n'importe quel arc (toutes tailles), il exercera une force douce et constante (100 gr).
- Il se coupe facilement (bord plat, spire fermée), il suffira ensuite de la compresser entre les brackets.

3 longueurs de 18 cm

~~62,86€<sup>ttc</sup>~~  
**-20%**  
50,29€<sup>ttc</sup>

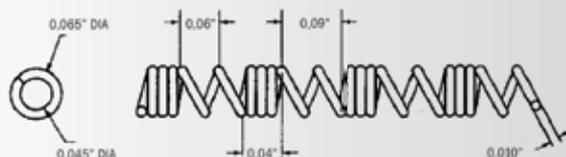

# ONYX

## BRACKET AUTO LIGATURANT ACTIF


~~5,80€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**2,90€<sup>ttc</sup>**



- Ouverture ou fermeture du Clapet ultra sécurisée et facile
- Clapet avec ressort pour un meilleur maintien de l'arc dans le slot
- Ailettes relevées et douces pour la pose des chainettes
- Torque dans la base
- Crochet disponible sur 3,4,5
- Identification code couleur

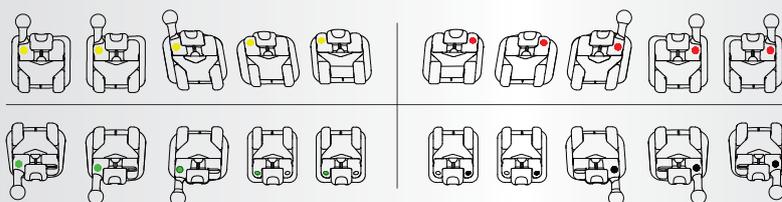

## LE BRACKET BERYL SL

**NEW**



Un design + une philosophie, c'est ce que « Beryl SL » vous assure, vous avez fait le meilleur choix de bracket self ligating, un profil ultra plat avec des dimensions réduites, une porte coulissante très performante.



~~7,80€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**3,90€<sup>ttc</sup>**

### Caractéristiques :

- Torque dans la base et une base mesh qui vous assure un meilleur collage,.
- Des ailettes relevées et douces pour plus de confort.
- Mise en place aisée des chainettes.
- Un slot adouci avec une finition parfaite.
- Identification de couleurs pour faciliter la reconnaissance des brackets.
- Clip confortable et facile avec une grande longévité d'utilisation.
- Slot vertical pour placement des auxiliaires sur 2 /4 /5 Sup et Inf.
- Possibilité de crochet 3 /4 /5 Sup et Inf.

# ARCS NITI



Sections d'arcs disponibles en rond :

- .012 • .014 • .016
- .018 • .020

Carré, rect. : 14x25

- 16x16 • 16x22 • 16x25
- 17x25 • 18x18 • 18x25
- 19x25 • 20x20 • 21x25

sur demande d'autres sections sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop :  
+5e par boîte de 10

Rond

~~26,06€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**13,03€<sup>ttc</sup>**

- 10 arcs

Rectangulaire

~~30,38€<sup>ttc</sup>~~


**-50%**

**15,20€<sup>ttc</sup>**

- 10 arcs

à partir de **1,30€<sup>ttc</sup>** l'Arc

# ARCS THERMIQUES

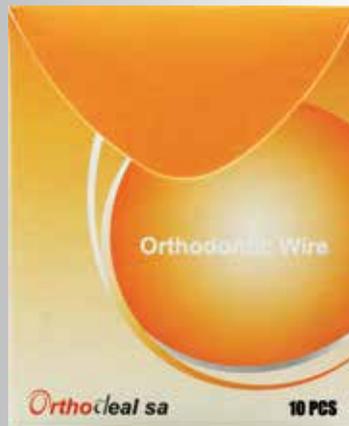

Sections d'arcs disponibles en rond :

- .012 • .014 • .016
- .018 • .020

Carré, rect. : 14x25

- 16x16 • 16x22 • 16x25
- 17x25 • 18x18 • 18x25
- 19x25 • 20x20 • 21x25

sur demande d'autres sections sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop :  
+5e par boîte de 10

Rond

~~36,87€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**18,43€<sup>ttc</sup>**

- 10 arcs

Rectangulaire

~~41,20€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**20,60€<sup>ttc</sup>**

- 10 arcs

à partir de **1,84€<sup>ttc</sup>** l'Arc

# ARCS BIO MULTIFORCE



Carré, rect. : 14x25 • 16x16

- 16x22 • 16x25 • 17x25
- 18x18 • 18x25 • 19x25
- 20x20 • 21x25

sur demande d'autres sections sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop :  
+5e par boîte de 10

~~69,42€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**34,70€<sup>ttc</sup>**

- 10 arcs

à partir de **3,47€<sup>ttc</sup>** l'Arc

**PROMOTION  
SINGLE  
PACK**

# ARCS TMA<sup>®</sup>



Carré, rect. : 14x25 • 16x16

- 16x22 • 16x25 • 17x25
- 18x18 • 18x25 • 19x25
- 20x20 • 21x25

sur demande d'autres sections sont disponibles.

Arcs avec V-BEND et/ou stop :  
+5e par boîte de 10

~~75,90€<sup>ttc</sup>~~

**-50%**

**37,95€<sup>ttc</sup>**


- 10 arcs

à partir de **3,79€<sup>ttc</sup>** l'Arc

\* Damon<sup>®</sup> : nom déposé par Ormcosybron

\* TMA<sup>®</sup> : nom déposé par Ormcosybron

+ de 20 0 000 arcs vendus en 2017 et 100% des clients satisfaits

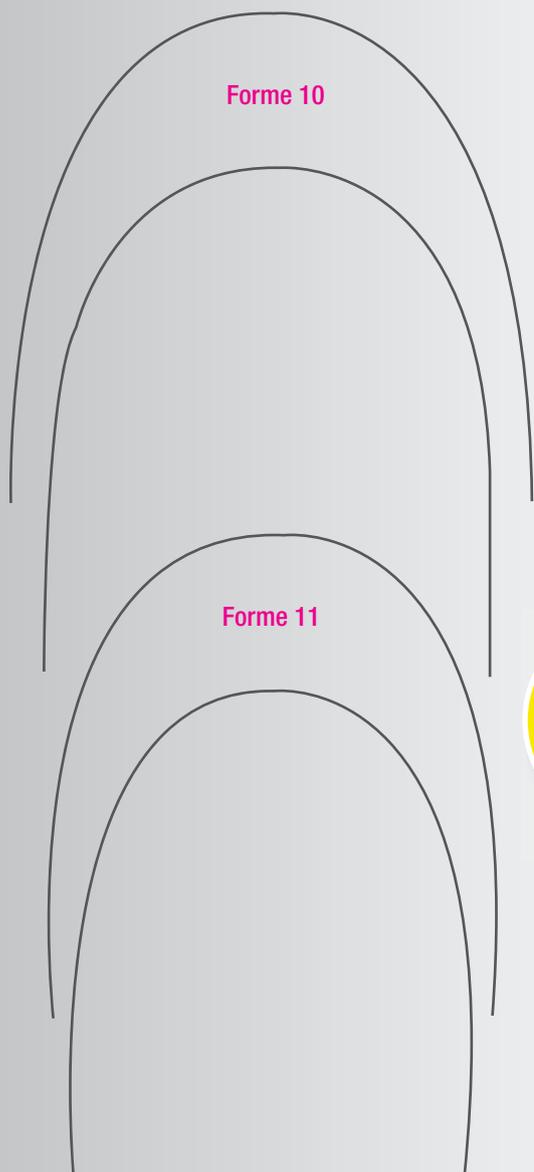


**FORMES  
disponibles**



**NITI FORM**  
Damon\*-pré Stoppé  
**18,03€<sup>ttc</sup>** / Rond  
**20,02€<sup>ttc</sup>** / Rect  
les 10 en  
single pack

\* Damon® : nom déposé par Ormcosybron

## ARCS NITI ESTHÉTIQUE

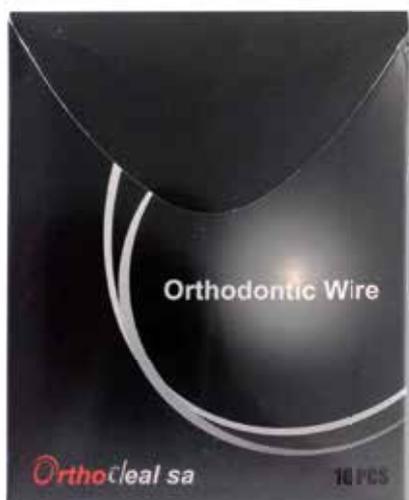

**5 BOITES ACHETÉES  
=  
5 OFFERTES**

soit  
**42,32€<sup>ttc</sup>**  
les 10 arcs

**ULTRA ESTHETIC  
Nickel titanium**

**84,64€<sup>ttc</sup>**  
les 10 arcs

**Single Pack**

Un arc en niti couleur dent pour optimiser votre traitement esthétique, un arc qui ne s'écaille pas avec un minimum de friction.

- Couche externe en polymère couleur dent et un noyau en niti
- Vendu en boîte de 10 en single pack unitaire
- Disponible en forme 10
- Extrêmement résistant
- Ne change pas la dimension de l'arc sélectionné

**Sections disponibles :**



Ronds : .012 / .014 / .016 / .018

Rect. : .014 x .025 / .016 x .016 / .016 x .022 /  
.018 x .025 / .019 x .025

# PORTE-EMPREINTES INOX

**-20%**  
sur toute  
la gamme

Porte-empreintes inox perforés avec bords Rétentifs  
Marquage laser personnalisé, **OFFERT POUR L'ACHAT DE 20 PIÈCES**

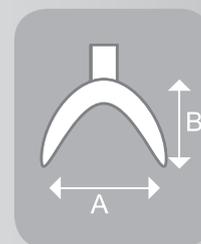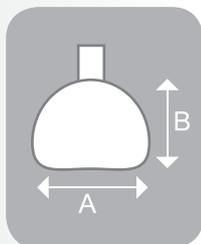

## SUPÉRIEUR

REF	TAILLE MM
3041.U1	61x47
3041.U2	64x51
3041.U3	66x53
3041.U4	69x57
3041.U5	71x60
3041.U6	73x62

## INFÉRIEUR

REF	TAILLE MM
3041.L1	55x47
3041.L2	60x49
3041.L3	72x54
3041.L4	75x57
3041.L5	76x59
3041.L6	78x61

# CIRE PRÉ-DOSÉE



~~30€<sup>ttc</sup>~~  
**PROMO**  
**13,50€<sup>ttc</sup>**

- Appliquer sur les parties gênantes de l'appareil orthodontique. La cire de protection évite l'inconfort du patient durant les premiers jours d'adaptation du traitement.
- Format et quantité adéquat, prêt à l'usage.
- Pratique les plaquettes de poche.
- Emballage hygiénique
- Goût menthe
- 10 boîtes de 20 pastilles de cire

## CIRE ORTHODONTIQUE DE PROTECTION

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

10 plaquettes

35.33.001

# KIT DE SRIPPING

**SYSTÈME DE STRIPS DIAMANTÉS OSCILLANT**, pour la réduction de l'espace interdentaire, rapide et précis pour le praticien et confortable pour le patient.

~~490€<sup>ttc</sup>~~ Pièce  
**-20%**  
**392€<sup>TTC</sup>**



Ref : CX235



Ref : CX235C311

### INCLUANT :

- 10 strips de 015µm à 090µm perforé double face
- 1 Contre angle
- Jauge de mesure x 6 tailles

## PROMO STRIP

~~14,40€<sup>ttc</sup>~~ Pièce  
**-20%**  
**12€<sup>TTC</sup>**



### REF CONTRE ANGLE

REF	PV TTC
CX235C311	370 €

### REF STRIP (double face perforé)

REF	TAILLE MM	PV TTC
001015H	0.05 mm	12 €
001025H	0.08 mm	12 €
001040H	0.14 mm	12 €
001060H	0.18 mm	12 €
001090H	0.24 mm	12 €

## PROMOTION

Découvrez nos tarifs

Téléphonez-nous au

01 47 82 09 48

# ADHÉSIFS ET CONTENTIONS

RELIANCE

Le N°1 en produit de collage Orthodontique dans le monde,  
une garantie de collage dans votre cabinet

## LIGHT BOND

Kit de collage pour les brackets



### Conditionnement :

- 4 seringues de 5 gr
- 2 pots de sealant 3 cc
- 1 pot etching
- 2 spatules
- 1 paquet de 50 pinceaux
- 1 bloc à spatuler

## ULTRA BAND LOK

Kit de collage pour les bagues - photopolymérisable sans mélange



- Produit très puissant à haut pouvoir rétentif
- Nettoyage de la dent plus facile (bleu)
- Très facile à utiliser (pas de mélange)
- Pas de contrainte de temps
- Permet de faire un plan de surélévation occlusal (blanc)
- Existe en deux couleurs : bleu et blanc

## ASSURE



- Augmente l'adhésion et minimise les décollements
- Supporte l'humidité
- Diffusion d'ions fluorés pendant le traitement

## ASSURE PLUS



- Et maintenant le nouveau **Assure Plus** : le seul primer qui colle sur toutes les surfaces
- Email classique ou atypique
  - Amalgame
  - Acier, Or, etc.

## BOND A BRAID



- Grande flexibilité
- Souplesse d'utilisation
- Très maléable

## RETANIUM



- 70% plus fort que le multi brin
- Meilleur maintient
- Fil plat
- Sans nickel
- Très facile à manipuler

# FLEX TECH (OR-ACIER)

## FLEX TECH OR



Fil de contention tressé en Or ou acier, une des références sur le marché orthodontique, ce fil vous permet :

- D'épouser avec précision la forme de l'arcade
- D'avoir une grande flexibilité et une grande maléabilité

## FLEX TECH ACIER



# CONTENTION NITI

100% contention, 100% niti, 100% confortable, 100% facile, 100% de résultat



C'est la nouvelle génération de contention avec un Niti inerte de très haute qualité, ce fil ultra plat saura vous séduire avec sa facilité d'adaptation en bouche et aussi grâce à ses caractéristiques :

- Fil inerte à 100%
- Sablage sur la surface apportant une rétention maximum au collage
- Très facile d'utilisation
- Grande malléabilité
- Taille disponible : 0.008 x 0.028
- Vendu en longueur (tube de 10 fils de 18 cm)

# CONTENTION EVERSTICK ORTHO



Les renforts everStick® sont constitués de fibres de verre incorporées dans un gel de résines Bis-GMA et PMMA. Au contact des résines dentaires la gaine externe du renfort se dissout partiellement pour laisser le composite pénétrer dans le faisceau.

Une double liaison se forme alors entre le composite et le renfort :

- Micro-mécanique par inter-pénétration entre les deux matériaux
- Chimique : le Bis-GMA du composite s'associant au Bis-GMA du renfort everStick®


# FOR SNORERS




S1

AVANT

OUVERTURE D'ARTICULÉ 7 MM

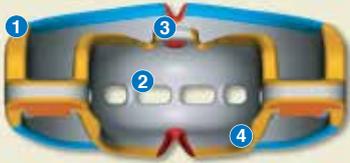

ARRIÈRE

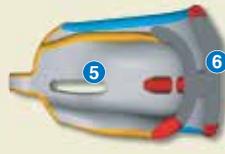

COUPE


Le myOSA® S1 est spécifiquement conçu pour les ronfleurs qui respirent par la bouche en dormant. Le S1 soulage le ronflement en avançant la mâchoire du dormeur et en ouvrant l'articulé, ce qui ouvre les voies aériennes. De plus, le S1 possède quatre grands trous de respiration sur le devant pour réguler la respiration, et un *Air Spring Core* pour préserver l'articulation de la mâchoire. La conception souple de l'appareil le rend également adapté aux troubles de l'ATM.




S2

AVANT

OUVERTURE D'ARTICULÉ 5MM

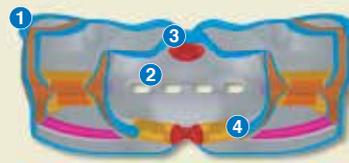

ARRIÈRE

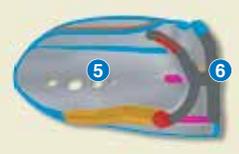

COUPE

Le myOSA® S2 est conçu pour les ronfleurs qui ne sont pas des respirateurs buccaux ou qui ont déjà eu un traitement avec l'appareil S1. Le S2, qui est plus confortable que le S1, soulage le ronflement en avançant la mâchoire du dormeur et en ouvrant l'articulé, mais moins que le S1. Avec des trous de respiration plus petits, le S2 optimise la respiration en imposant une partie de respiration nasale, il rééduque la respiration nasale.

## Protocole de traitement conseillé : 8 - 12 ans



1<sup>ÈRE</sup> PHASE :

J1 large (6 à 9 ans)

**1<sup>ÈRE</sup> PHASE : J1 large (6 à 9 ans).**

Le patient porte un appareil amovible souple (en silicone) qui possède des trous sur la face antérieure pour le rassurer lors du port nocturne. Correction des fonctions les 6 premiers mois.

Porté 1H/jour en continu + la nuit.

Si respirateur buccal, porté 15 à 20 mn (2 à 3 fois dans la journée) puis 1H/jour



2<sup>ÈME</sup> PHASE :

K2 medium (6 à 9 ans)

**2<sup>ÈME</sup> PHASE : K2 medium (6 à 9 ans).**

Appareil plus rigide avec l'armature en vinyle afin de corriger le sens transversal et travailler sur la forme d'arcade. Temps de port : 6 mois.

Porté 1H/jour + la nuit.



3<sup>ÈME</sup> PHASE :

T3 (taille N°1 à N°7 avec la règlette de mesure)

**3<sup>ÈME</sup> PHASE : T3 (taille N°1 à N°7 avec la règlette de mesure).**

Appareil avec indentations de 4 à 4 + armature pour les fins de traitements.


Peut corriger une rotation sur le bloc antérieur en maintenant l'alignement dentaire.

Porté 1H/jour et/ou la nuit.

# MYOBRACE AVEC TRAITEMENT ORTHODONTIQUE

NOUVELLE GAMME **myobrace**<sup>®</sup>

IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR SOLUTIONNER LES PROBLEMES DE TRS (trouble respiratoire du sommeil) AVEC LES BRACKETS

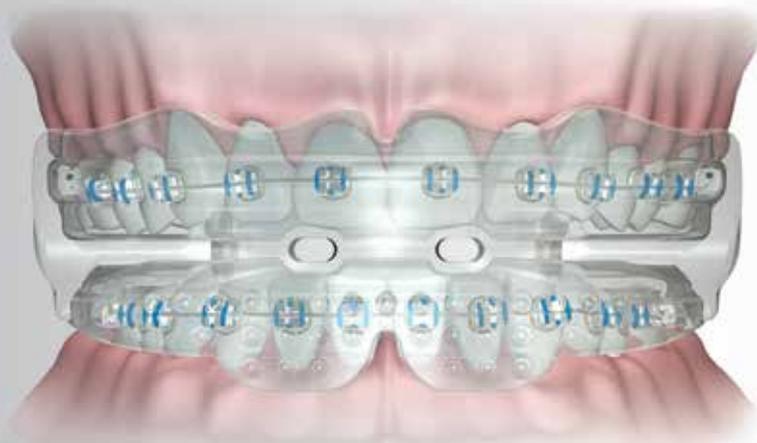

Expansion d'arcade assistée par le B1 et le B2



Augmenter l'efficacité de votre traitement ortho en


- Corrigeant la position linguale
- Favoriser la respiration nasale en ouvrant les voies aériennes
- Tout cela en développant une expansion stable et efficace

# Myobrace for Braces™



**PERMANENT  
DENTITION  
WITH BRACES**

Myobrace for Braces™ est un système d'appareils en trois étapes spécifiquement conçu pour être compatible avec les brackets tout en corrigeant les mauvaises habitudes buccales, pour améliorer les problèmes de développement

des maxillaires supérieurs et inférieurs et aider les brackets à aligner les dents en position correcte. Ces appareils corrigent les mauvaises habitudes myofonctionnelles qui peuvent causer un mauvais alignement dentaire, tout en exerçant des forces légères pour contribuer à l'expansion du maxillaire et aider les brackets à aligner les dents dans leurs positions correctes.

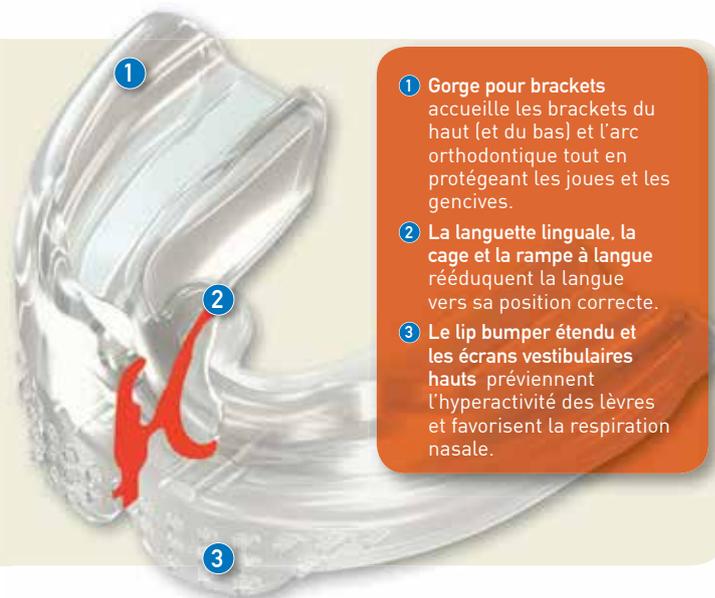

- 1 Gorge pour brackets accueille les brackets du haut (et du bas) et l'arc orthodontique tout en protégeant les joues et les gencives.
- 2 La languette linguale, la cage et la rampe à langue réduisent la langue vers sa position correcte.
- 3 Le lip bumper étendu et les écrans vestibulaires hauts préviennent l'hyperactivité des lèvres et favorisent la respiration nasale.

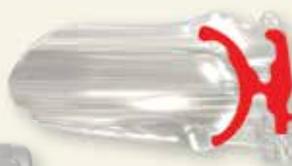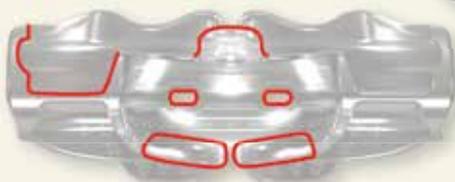

APPAREIL B1 (à gauche)  
B1 EN COUPE (ci-dessus)

## MYOBRACE® B1

Le B1 corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.



APPAREIL B1 LING (à gauche)  
B1 LING EN COUPE (ci-dessus)


## MYOBRACE® B1 LING

Le B1 LING corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.

CORRECTION DES HABITUDES

ÉTAPE 1

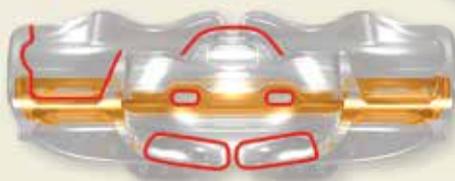

APPAREIL B2 (à gauche)  
B2 EN COUPE (ci-dessus)


## MYOBRACE® B2

Le B2 réalise une expansion d'arcade.

Il possède une gorge pour brackets, un Dynamicore™, une languette linguale, une cage, une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour contribuer au développement d'arcade, corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.

EXPANSION D'ARCADE

ÉTAPE 2

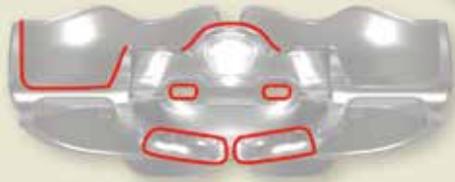

APPAREIL B3 (à gauche)  
B3 EN COUPE (ci-dessus)

## MYOBRACE® B3


Le B3 corrige les habitudes pendant la phase de contention.

Il possède une gorge élargie, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec des gouttières transparentes.

CORRECTION DES HABITUDES PENDANT LA PHASE DE CONTENTION

ÉTAPE 3

# Myobrace® for Juniors

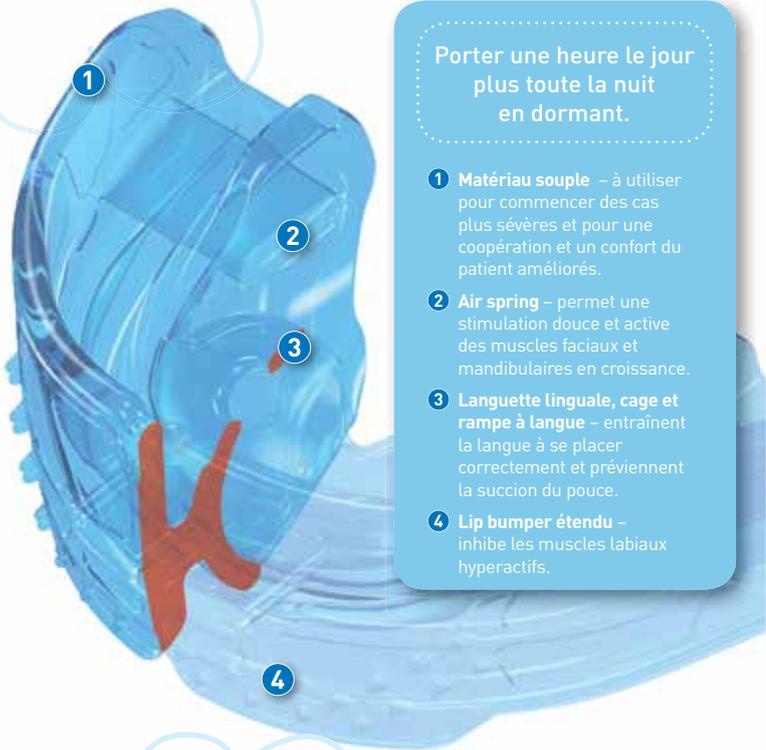

Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.


- 1 **Matériau souple** – à utiliser pour commencer des cas plus sévères et pour une coopération et un confort du patient améliorés.
- 2 **Air spring** – permet une stimulation douce et active des muscles faciaux et mandibulaires en croissance.
- 3 **Languette linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement et préviennent la succion du pouce.
- 4 **Lip bumper étendu** – inhibe les muscles labiaux hyperactifs.

## Denture de lait

*Myobrace® for Juniors* est un système d'appareils en trois étapes spécifiquement conçu pour corriger les mauvaises habitudes orales tout en traitant les problèmes de développement des mâchoires supérieure et inférieure. *Myobrace® for Juniors* est le plus efficace en denture de lait, dès trois ans et jusqu'à six ans. *Pour une aide à la sélection d'appareil, utilisez l'outil "Sélecteur d'appareil" sur [myoresearch.com](http://myoresearch.com).*

### Conçu pour :

- Corriger les problèmes de respiration (buccale).
- Corriger la position de la langue et le schéma de déglutition.
- Exercer les muscles des mâchoires.
- Remplacer la sucette.
- Améliorer le développement naturel des arcades.
- Traitement précoce des béances et articulés croisés.

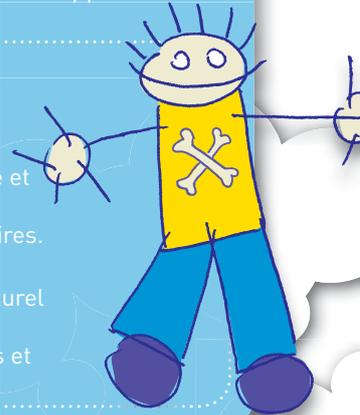

3 à 6 ans  
ou 6 à 9 ans

Tous les appareils *Myobrace®* sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.



### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1



4-6 mois



Le *J1* est disponible en médium et large, en rose et en bleu.  
APPAREIL *J1* – VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)  
*J1 EN COUPE* (ci-dessus)

### MYOBACE® J1

Le *J1* se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible, ce qui permet une meilleure coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion. Il comporte des trous de respiration antérieurs pour autoriser un minimum de respiration buccale au début. Le ressort pneumatique postérieur encourage l'exercice des muscles crânio-mandibulaires. Ne passez au *J2* que lorsque le *J1* est conservé toute la nuit et que la respiration nasale est établie.



### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue.

ÉTAPE 2



4-6 mois



Le *J2* est disponible en médium et large, en rose et en bleu.  
APPAREIL *J2* – VUE SUPÉRIEURE (à gauche)  
*J2 EN COUPE* (ci-dessus)

### MYOBACE® J2

Le *J2* se focalise sur le développement d'arcade et sur la poursuite de la correction des habitudes. Ses trous de respiration sont plus petits, vu que la respiration nasale a été établie à l'étape précédente. Il se focalise sur l'établissement d'une position de repos de la langue et d'une déglutition correctes. Le *J2* est fabriqué dans un matériau de rigidité moyenne qui aide à développer la forme d'arcade et à corriger la relation inter-arcades. Ne passez au *J3* que lorsque les objectifs ci-dessus ont été atteints.




### ALIGNEMENT DES MAXILLAIRES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes.

ÉTAPE 3



4-6 mois

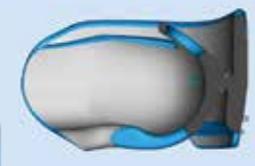


Le *J3* est disponible en médium et large, en rose et en bleu.  
APPAREIL *J3* – VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (à gauche)  
*J3 EN COUPE* (ci-dessus)

### MYOBACE® J3

Le *J3* se focalise sur la finition du développement d'arcade, la forme d'arcade correcte et la correction des habitudes. Le matériau du *J3* est plus rigide pour exercer plus de forces sur les dents et les maxillaires pour un meilleur alignement, il optimise la forme d'arcade pour les dents antérieures permanentes en éruption. La languette linguale plus large permet à la langue de reposer dans sa position naturelle, directement sur le point approprié. Passez à la série *Myobrace® for Kids* si un traitement supplémentaire est nécessaire en denture mixte.

# Myobrace® for Kids


## Denture mixte

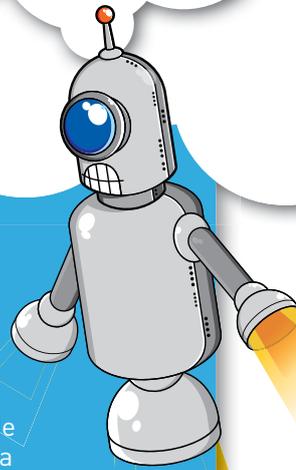

Myobrace® for Kids est un système d'appareils en trois étapes, spécifiquement conçu pour corriger la respiration buccale et les mauvaises habitudes orales, ce qui aide à traiter les problèmes de développement du maxillaire et de la mandibule. Il aide les dents permanentes à faire s'aligner à leurs positions naturelles. Très efficace du début au milieu de denture mixte – 6 à 10 ans. Pour une aide à la sélection d'appareil, utilisez l'outil 'Sélecteur d'appareil' sur [myoresearch.com](http://myoresearch.com).

### Conçu pour :

- Malocclusions de Classe II 1 + 2.
- Encombrement antérieur (haut + bas).
- Supraclusion.
- Béance.

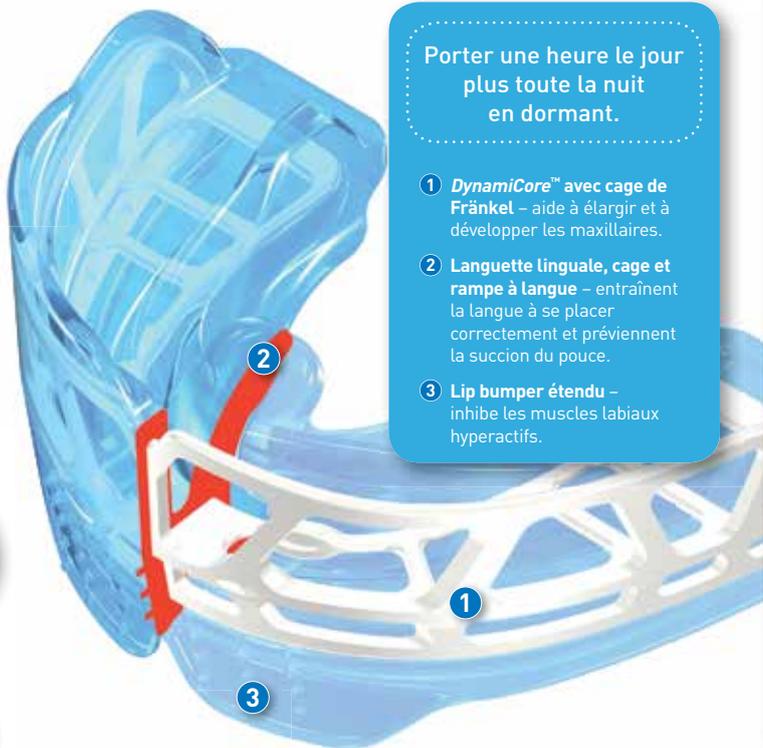

Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.

- 1 **DynamiCore™ avec cage de Fränkel** – aide à élargir et à développer les maxillaires.
- 2 **Languette linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement et préviennent la succion du pouce.
- 3 **Lip bumper étendu** – inhibe les muscles labiaux hyperactifs.

6 à 10 ANS


Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.



### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1

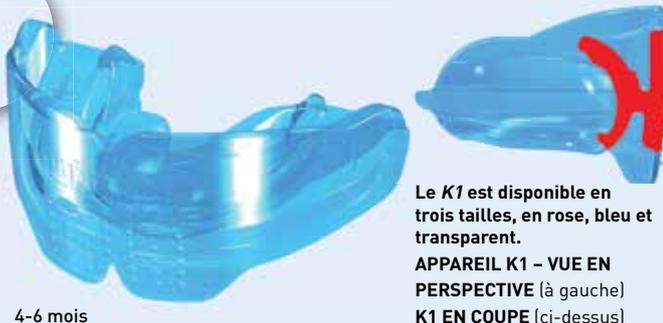

4-6 mois

Le K1 est disponible en trois tailles, en rose, bleu et transparent.

APPAREIL K1 – VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)  
K1 EN COUPE (ci-dessus)

### MYOBACE® K1

Le K1 se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible ce qui permet une excellente coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion, et optimise la rétention nocturne. Ne passez au K2 que lorsque le K1 reste en place toute la nuit et que la respiration nasale est établie.



### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue.

ÉTAPE 2



4-6 mois

Le K2 est disponible en trois tailles, en rose, bleu et transparent.

APPAREIL K2 – VUE SUPÉRIEURE (à gauche)  
K2 EN COUPE (ci-dessus)

### MYOBACE® K2


Le K2 se focalise sur le développement d'arcade et la poursuite de la correction des habitudes. Il possède un DynamiCore™ qui aide au développement des formes d'arcade du haut et du bas, ménageant davantage de place pour établir la position de repos correcte de la langue et corriger le schéma de déglutition. Ne passez au K3 que lorsque la forme d'arcade est améliorée, et que la position de repos correct de la langue et le schéma de déglutition ont été établis, ainsi qu'un bon alignement dentaire.



### ALIGNEMENT DES MAXILLAIRES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes.

ÉTAPE 3

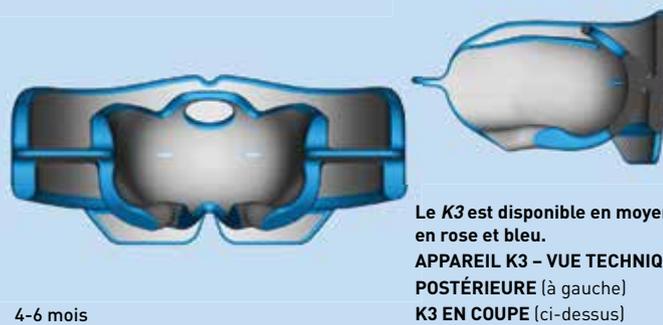

4-6 mois


Le K3 est disponible en moyen, en rose et bleu.

APPAREIL K3 – VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (à gauche)  
K3 EN COUPE (ci-dessus)

### MYOBACE® K3

Le K3 se focalise sur la finition de la correction des habitudes, l'alignement dentaire final et la contention, grâce à sa construction en polyuréthane plus rigide. La languette linguale creuse facilite la position finale de la langue directement sur le point. Il sert aussi de contention jusqu'à éruption de la denture permanente. Le K3 peut être suivi des T3 et T4 pour l'alignement dentaire final de la denture permanente en développement.

# Myobrace® for Teens

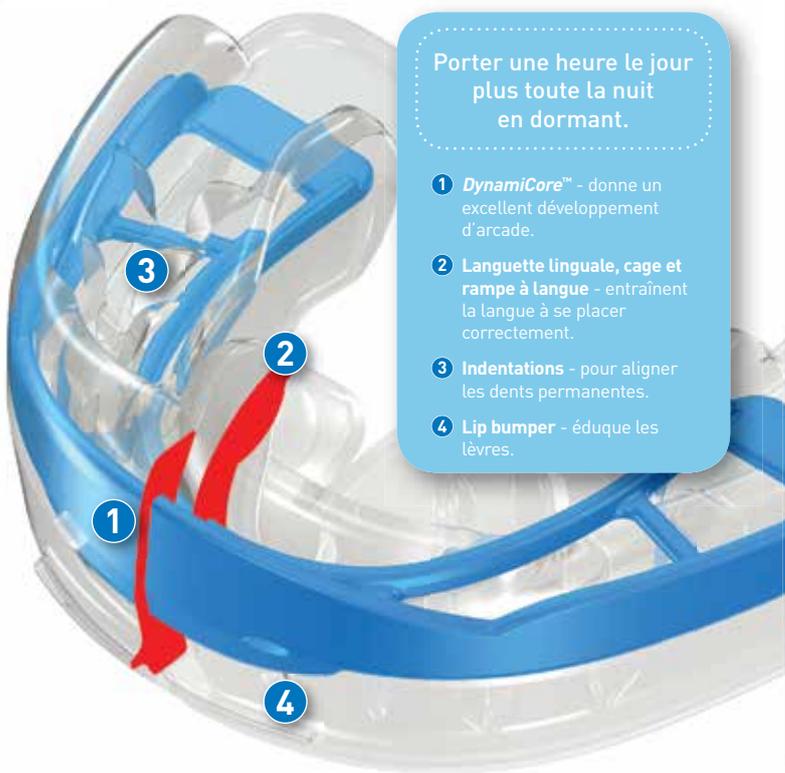

Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.

- 1 **DynamiCore™** - donne un excellent développement d'arcade.
- 2 **Languette linguale, cage et rampe à langue** - entraînent la langue à se placer correctement.
- 3 **Indentations** - pour aligner les dents permanentes.
- 4 **Lip bumper** - éduque les lèvres.

## Développer la denture permanente

### Myobrace® for Teens

Le *Myobrace® for Teens* est un système d'Orthodontie Myofonctionnelle en quatre étapes conçu pour se substituer à une orthodontie complexe avec brackets et extractions. L'objectif principal est de corriger la respiration buccale et les mauvaises habitudes myofonctionnelles qui causent la malocclusion, alors que l'appareil de l'étape 3 (T3) guide les dents permanentes en éruption vers leurs positions naturelles d'alignement dans la denture en développement. Si la coopération est bonne, les brackets ne sont souvent pas nécessaires.

#### Conçu pour :

- Traiter les malocclusions en fin de denture mixte.
- Malocclusion de Classe II Division 1 + 2.
- Encombrement antérieur (haut et bas).
- Supraclusion.
- Bécance.

10 à 15 ANS

Tous les appareils *Myobrace®* sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.



#### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1



4-6 mois

Le T1 est disponible en medium et en large.

APPAREIL T1 - VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)  
T1 EN COUPE (ci-dessus)

#### MYOBACE® T1


Le T1 se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible ce qui permet une excellente coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion, et optimise la rétention nocturne. Ne passez au T2 que lorsque le T1 reste en place toute la nuit et que la respiration nasale est établie.



#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une respiration nasale et une forme d'arcade correcte.

ÉTAPE 1

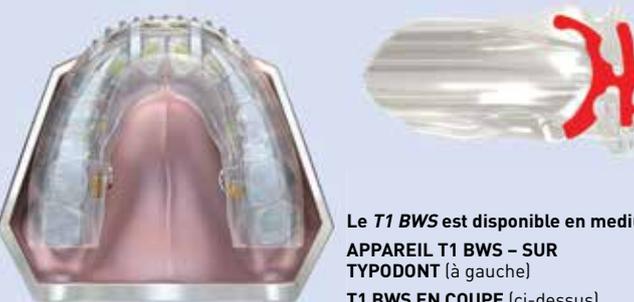

Le T1 BWS est disponible en medium.  
APPAREIL T1 BWS - SUR TYPODONT (à gauche)  
T1 BWS EN COUPE (ci-dessus)

#### MYOBACE® T1 BWS

Le T1 BWS est conçu pour être utilisé avec le *Farrell Bent Wire System™ (BWS™)* pour avoir un développement d'arcade plus rapide. Il se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction myofonctionnelle, tandis que le *Bent Wire System™* opère une expansion de la forme de l'arcade pour dégager plus de place pour une position correcte de la langue. Une fois l'espace suffisant dans l'arcade supérieure obtenu, le BWS™ est déposé et le traitement progresse vers le *Myobrace® T2*.



#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position de la langue, une posture labiale et une déglutition correctes.

ÉTAPE 2



4-6 mois

Le T2 est disponible en medium et en large.  
APPAREIL T2 - VUE SUPÉRIEURE (à gauche)  
T2 EN COUPE (ci-dessus)

#### MYOBACE® T2

Le T2 se focalise sur l'obtention et le maintien d'un développement d'arcade correcte avec le *DynamiCore™* spécifique à ce groupe d'âge, qui possède des éléments supplémentaires dans le secteur antérieur pour favoriser un développement antérieur supplémentaire de l'arcade. Cela donne de l'espace à la langue pour se placer en position de repos correcte et pour corriger le schéma de déglutition, ce qui améliore l'alignement dentaire. Ne passez au T3 que lorsque tous les objectifs ci-dessus sont atteints.



### ALIGNEMENT DENTAIRE

Alignement dentaire une fois que les habitudes et la coopération sont bonnes.

ÉTAPE 3



4-6 mois



Le T3 est disponible en sept tailles.

APPAREIL T3 - VUE SUPÉRIEURE (à gauche)  
T3 EN COUPE (ci-dessus)

### MYOBACE® T3

Le T3 est l'étape d'alignement dentaire, avec le *DynamiCore™* agissant comme un arc et les indentations augmentant la longueur d'arcade tout en aidant à l'alignement dentaire. Avec le T3, la coopération est essentielle pour prévenir toute perte d'espace sur l'arcade, ce qui se produit quand l'appareil n'est pas porté régulièrement. Le T3 se focalise essentiellement sur l'alignement dentaire, mais possède toujours les caractéristiques de correction des habitudes du T1 et du T2. Passez au T2 lorsqu'un alignement dentaire satisfaisant a été atteint.



### ALIGNEMENT DENTAIRE

Alignement dentaire une fois que les habitudes et la coopération sont bonnes.

ÉTAPE 3



Le T3N est disponible en sept tailles.

APPAREIL T3N - VUE SUPÉRIEURE (à gauche)  
T3N EN COUPE - (ci-dessus)

### MYOBACE® T3N


Le T3N est identique au T3, mais sans le noyau *DynamiCore™*. Cela le rend plus flexible avec une meilleure rétention. Il convient dans certains cas de le porter la nuit en dormant, et de porter le T3 le jour. Une alternative est d'utiliser le T2 la nuit et le T3 le jour pendant 1 à 2 mois, suivi du T3 en permanence. Passez au T4 la nuit après 2 mois, lorsqu'il reste en bouche toute la nuit.



### CONTENTION

Maintenir l'alignement dentaire et la correction des habitudes.

ÉTAPE 4

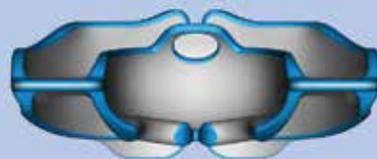

4-6 mois



Le T4 est disponible en medium et en large.

APPAREIL T4 - VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (à gauche)  
T4 EN COUPE (ci-dessus)

### MYOBACE® T4

Le T4 est le dernier appareil de la série *Teens*, qui poursuit toutes les corrections d'habitudes, maintient l'alignement dentaire et renforce la bonne posture linguale et la respiration nasale. Le T4 se focalise sur l'alignement final des dents et des maxillaires et est utilisé comme contention une fois le traitement terminé. La languette linguale creuse encourage la langue à se placer sur le point. Il peut être utilisé comme contention à long terme.

## Séquence d'appareils Myobrace® for Teens



Établir une respiration nasale et corriger la forme d'arcade.

Établir une position de la langue, une posture labiale et une déglutition correctes.

Alignement dentaire une fois que les habitudes et la coopération sont bonnes.

Maintenir l'alignement dentaire et la correction des habitudes.

## Étude de cas - Traitement avec la série d'appareils Myobrace® for Teens



Cette patiente de 13 ans et 6 mois présente une malocclusion de Classe II sévère. L'Évaluation Orthodontique Myofonctionnelle (EOM) indique que la patiente était une respiratrice buccale avec un schéma de déglutition atypique et une fonction labiale aberrante.


Des améliorations significatives de l'alignement dentaire et du développement facial étaient visibles après 12 mois d'utilisation de la série Myobrace® for Teens pour établir une respiration nasale et corriger les habitudes myofonctionnelles. Correction complète de la Classe II.

# CL III DENTURE MIXTE

## Myobrace for Interceptive Class III™

La majorité des malocclusions de Classe III proviennent d'une déficience maxillaire due à une respiration buccale et à une position basse de la langue. Ce qui provoque des malocclusions de Classe III à la fois squelettiques et dentaires. Le système d'appareils *Myobrace® Interceptive Class III* est spécifiquement conçu pour corriger les malocclusions de Classe III. Il est le plus efficace en début de denture mixte (de 5 à 8 ans). L'appareil possède une compensation supplémentaire pour améliorer la correction dentaire des articulés croisés antérieurs.

Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.

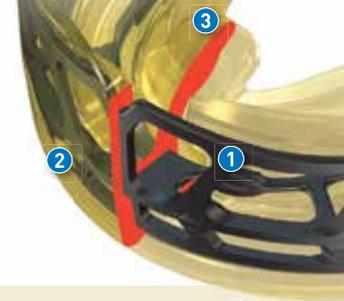

- 1 **DynamiCore™ avec cage de Fränkel** – aide à élargir et à développer les maxillaires, dégageant davantage d'espace pour la langue.
- 2 Les petits trous de respiration et la forme des arcades jumelles préviennent la respiration buccale, fréquente dans la plupart des cas de Classe III.
- 3 **Langue linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement. Cela peut prévenir une croissance indésirable de la mandibule.

**5 à 8 ANS**

Tous les appareils *Myobrace®* sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

**i-3<sup>N</sup>**

**CORRECTION DES HABITUDES**

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1



4-6 mois



L'*i-3N* est disponible en trois tailles, en jaune et en transparent.  
**APPAREIL i-3N – VUE EN PERSPECTIVE** (à gauche)  
**i-3N EN COUPE** (ci-dessus)

**MYOBRACE® i-3N**

L'*i-3N* se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible ce qui permet une excellente coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion, et optimise la rétention nocturne. Ne passez à l'*i-3<sup>N</sup>* que lorsque l'*i-3N* reste en place toute la nuit et que la respiration nasale est établie.

**i-3<sup>®</sup>**

**DÉVELOPPEMENT D'ARCADE**

Établir une position correcte de la langue.

ÉTAPE 2



4-6 mois



L'*i-3<sup>®</sup>* est disponible en trois tailles, en jaune et en transparent.  
**APPAREIL i-3<sup>®</sup> – VUE SUPÉRIEURE** (à gauche)  
**i-3<sup>®</sup> EN COUPE** (ci-dessus)

**MYOBRACE® i-3<sup>®</sup>**

L'*i-3<sup>®</sup>* se focalise sur le développement d'arcade et la poursuite de la correction des habitudes. Il possède un *DynamiCore™* qui a un effet Fränkel, ce qui aide à développer l'arcade supérieure. Ceci aide à corriger la malocclusion de Classe III. Ne passez à l'*i-3H* que quand la forme d'arcade s'est améliorée, que la position de repos de la langue et un schéma de déglutition correct ont été établis, avec un bon alignement dentaire.

**i-3<sup>H</sup>**

**ALIGNEMENT FINAL ET CONTENTION**

Maintien la posture labiale et une déglutition correcte.

ÉTAPE 3



4-6 mois



L'*i-3H* est disponible en medium, en jaune et en transparent.  
**APPAREIL i-3H – VUE POSTÉRIEURE** (à gauche)  
**i-3H EN COUPE – VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE** (ci-dessus)

**MYOBRACE® i-3H**

L'*i-3H* se focalise sur la finalisation de la correction des habitudes, la correction de la Classe III, l'alignement dentaire final et la contention, grâce à sa construction en polyuréthane plus rigide.

La languette linguale creuse facilite la position finale de la langue sur le point.

**iP-3<sup>®</sup>**

**DENTURE PERMANENTE**

Correction des habitudes myofonctionnelles et correction de la Classe III dentaire.



\*surplomb : 3mm  
Le *P-3<sup>®</sup>* est disponible en medium, en transparent et en vert.  
**APPAREIL P-3<sup>®</sup> VUE EN PERSPECTIVE** (à gauche)  
**P-3<sup>®</sup> EN COUPE** (ci-dessus)

**MYOBRACE® P-3<sup>®</sup> DENTURE PERMANENTE**

Le *P-3<sup>®</sup>* est destiné à la denture permanente quand la Classe III squelettique est difficile à corriger. Le *P-3<sup>®</sup>* se focalise sur la correction de la Classe III dentaire et de l'articulé croisé antérieur lorsque c'est possible. Il opère une correction des habitudes (respiration buccale et déglutition atypique). Le surplomb supplémentaire\* de 3mm entre les arcades supérieure et inférieure corrige la Classe III dentaire. NB : La correction des Classes III en denture permanente n'est pas toujours possible.

# Myobrace® for Kids - Broad

## Denture mixte

La série d'appareils *Myobrace® K1 broad, K2 broad et K3 broad*, en taille medium (6 à 9 ans) a été conçue pour des patients ayant un profil plat et nécessitant une forme d'arcade carrée, en relation à la réhabilitation neuro-occlusale du Professeur Pedro Planas, par rapport aux mouvements de latéralité. L'appareil possède une forme d'arcade antérieure plate, une zone plus large pour l'emplacement des canines et une forme plus évasée sur la partie postérieure. Enfin, la forme d'arcade naturelle est déterminée par la position de la langue au palais. Cette série complète corrige les tissus mous dans la 1<sup>ère</sup> phase (position de la langue au palais, correction de la respiration nasale et de la posture), corrige la forme d'arcade dans la 2<sup>ème</sup> phase et stabilise le sens transversal en maintenant l'alignement dentaire dans la 3<sup>ème</sup> phase.



Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.

- 1 **DynamiCore®** breveté - spécifiquement conçu pour développer les arcades larges.
- 2 Languette linguale, cage et rampe à langue éduquent la langue à se placer correctement.
- 3 **Lip bumper étendu** - inhibe les muscles labiaux hyperactifs.
- 4 **Conception Broad** brevetée spécifiquement pour les arcades larges.

### Conçue pour des arcades larges avec

- Malocclusion de Classe II Division 1 + 2.
- Classe III.
- Encombrement antérieur (haut et bas)
- Supraclusion. • Béance.



6 à 12 ANS

Tous les appareils *Myobrace®* sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.



#### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1



4-6 mois

Le **K1 BROAD** est disponible en moyen et grand, en transparent et en jaune.

APPAREIL K1 BROAD - VUE PERSPECTIVE (à gauche)  
K1 BROAD EN COUPE (à-dessus)



#### MYOBRACE K1 BROAD

Le *K1 Broad* se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et sur la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible ce qui permet une excellente coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion, et optimise la rétention nocturne. Ne passez au *K2 Broad* que lorsque le *K1 Broad* reste en place toute la nuit et que la respiration nasale est établie.



#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue.

ÉTAPE 2



4-6 mois

Le **K2 BROAD** est disponible en moyen, en transparent et en jaune, avec un **DynamiCore®** rouge.

APPAREIL K2 BROAD - VUE SUPÉRIEURE (à gauche)  
K2 BROAD EN COUPE (à-dessus)



#### MYOBRACE K2 BROAD

Le *K2 Broad* se focalise sur le développement d'arcade et la poursuite de la correction des habitudes. Le *K2 Broad* possède un **DynamiCore™** qui aide au développement des arcades supérieure et inférieure. Cela dégage davantage d'espace pour établir une position de la langue et une déglutition correctes. Ce qui, à son tour, améliore l'alignement dentaire. Ne passez au *K3 Broad* que lorsque la forme d'arcade s'est améliorée, et quand la position de repos de la langue et un schéma de déglutition correct ont été établis.



#### ALIGNEMENT FINAL ET CONTENTION

Maintien de la posture labiale et d'une déglutition correcte.

ÉTAPE 3



4-6 mois

Le **K3 BROAD** est disponible en moyen, en rouge.

APPAREIL K3 BROAD - VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (à gauche)  
K3 BROAD EN COUPE (à-dessus)



#### MYOBRACE K3 BROAD

Le *K3 Broad* se focalise sur la poursuite de la correction des habitudes, l'alignement dentaire final et la contention, grâce à sa construction en polyuréthane plus rigide.

La languette linguale creuse facilite la position finale de la langue directement sur le point.

# PROMOTION GAMME MRC

Remises appliquées sur tous les appareils de chez MRC au sein de la gamme Trainer System et Myobrace (J/K/T/A/I/TMJ)

**myobrace®**



**myOSA®**  
MYOFUNCTIONAL SLEEP APPLIANCE



Référence	<b>MyOSA for JUNIOR</b>	
705010	MyOSA for juniors Cat	
	<b>MyOSA for KIDS</b>	
705020	MyOSA for kids dog	
	<b>MyOSA for SNORERS</b>	
700000	MYOSA TMJ	
700000	MyOSA s2	
	<b>MYOSA for TMJ - TMD</b>	
703000	MYOSA TMJ	
703011	MYOSA TMD low version	
	<b>MYOSA for Theeth Grinder</b>	
703030	MYOSA TG soft	
703035	MYOSA TG hard	



OrthoDeal

myobrace®

# L'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE

"Avoir des dents alignées de façon naturelle"

## Séminaire Education fonctionnelle 2.0

Conférencier : **Dr Jean-François Ollu**

L'orthodontie a pour objectif de redonner la possibilité aux patients d'avoir une croissance maxillo-faciale harmonieuse. Seuls **les traitements interceptifs** associant **traitement orthopédique, traitement orthodontique et traitement de l'étiologie fonctionnelle** permettent d'atteindre cet objectif.

Il existe une hiérarchie des causes fonctionnelles perturbant la croissance des maxillaires et le développement de la face : une perturbation de la ventilation nasale a pour conséquence une modification de la posture linguale, elle même responsable d'une déglutition dysfonctionnelle et d'une modification de l'équilibre musculaire non seulement de la sangle péri-orale mais aussi de l'ensemble de l'enveloppe faciale.

**Le concept d'éducation fonctionnelle** Myobrace permet de mettre en place **un véritable plan d'éducation thérapeutique** et un monitoring personnalisé des patients. Nous proposons de partager avec vous 20 ans de notre expérience clinique des traitements interceptifs.

26  
Nov

Lieu : **Paris**  
**Hôtel Paris Mariott**  
**Champs Elysées**

Prix : **189 €**



Myobrace est le leader Mondial, utilisé depuis plus de 20 ans partout dans le monde, vous découvrirez le meilleur concept et le plus abouti pour traiter l'orthodontie fonctionnelle. Myobrace est un système pratique et une gamme adaptée à chaque âge.

	Gamme Junior 4/6 ans	Gamme kids 6/10 ans	Gamme Teens 10/14 ans	Gamme Adulte	Traitement Class III
PHASE 1 Correction des mauvaises habitudes	J <sup>1</sup>	k <sup>1</sup>	T <sup>1</sup>	A <sup>1</sup>	i-3 <sup>''</sup>
PHASE 2 Développement des arcades	J <sup>2</sup>	k <sup>2</sup>	T <sup>2</sup>	A <sup>2</sup>	i-3
PHASE 3 Alignement final et contention	J <sup>3</sup>	k <sup>3</sup>	T <sup>3</sup> EX MB	A <sup>3</sup>	i-3 <sup>''</sup>



Conférencier :  
**Dr Jean-François Ollu**

## Formation Myobrace - 26 novembre 2018 - Paris

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier. Vous pouvez régler par chèque ou par carte bancaire en téléphonant au **01 47 82 09 48**.

Tarif : **189 €** (cours d'une journée incluant le repas à l'hôtel)

Horaires : 9h - 17h

Condition d'annulation : Les frais d'inscriptions ne seront plus remboursables 15 jours avant la date du cours.

### Contenu du cours

- Éducation fonctionnelle 2.0
- Les malocclusions orthodontiques : les solutions qu'apporte l'éducation fonctionnelle
- Cas cliniques traités en Myobrace

**Lundi 26 novembre 2018**

Nombre de participants : .....

Nom du docteur : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Tel : .....

Mail : .....

# FREEARCH®

Une approche révolutionnaire physiologique et esthétique



## 03 Déc

Docteur,

Nous avons le plaisir de vous présenter la **FORMATION FREEARCH** qui se déroulera lundi **3 décembre 2018 à Paris**.

Vous découvrirez Freearch,  
un système sur-mesure conçu par Dr Eric Marie-Catherine,  
Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription.

L'équipe Freearch

Lieu : **Paris**

**Hôtel Renaissance  
le Parc - Trocadéro**

Prix : **189 €**



[www.freearch.fr](http://www.freearch.fr)

## FREEARCH : une nouvelle technique pour vos traitements.

Un aligneur fonctionnel invisible sur mesure permettant de corriger plus rapidement et plus efficacement que tous les aligneurs du marché avec un port recommandé de seulement 2h en journée + port nocturne.

FREEARCH n'a rien de classique, il crée les conditions physiologiques optimales que vous souhaitez dès le début de vos traitements et permet ainsi de finir de façon personnalisée pour chaque patient.

En tant que professionnel de santé en Orthodontie, vous aurez le choix de finir votre traitement comme vous le souhaitez en accord avec votre patient pour un souci d'excellence et de résultat.

## En effet les systèmes classiques de gouttières ont des limites :

- Les finitions ne sont pas toujours faciles et n'aboutissent souvent pas comme escomptées.
- Les coûts sont élevés avec des traitements longs qui peuvent faire hésiter vos patients.
- Port fastidieux de 20 ou 22 heures par jour.
- Des gouttières perdues, cassées ou mal ajustées.

La solution idéale est peut-être ailleurs pour une maîtrise totale de votre traitement et un résultat optimal.

- Finaliser vos traitements en seulement quelques mois en vestibulaire ou lingual après l'aligneur fonctionnel FREEARCH.
- Finir avec des gouttières MYOBRACE en port nocturne avec également un excellent résultat.

## L'ALIGNEUR FONCTIONNEL

- Relaxe les muscles
- Aménage l'espace
- Commence l'alignement
- Réduit le temps de port et le temps de traitement

### Début du traitement avec aligneur



### Fin de traitement avec aligneur



## FORMATION FREEARCH - 3 DÉCEMBRE 2018 - PARIS

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier.

Vous pouvez régler par **chèque** (ordre Sté Orthodeal) ou par **carte bancaire** en téléphonant au **0147 82 09 48**.

Tarif : 189 € (cours d'une journée incluant le repas à l'hôtel)

Horaires : 9h - 17h

Condition d'annulation : les frais d'inscription ne seront plus remboursables 15 jours avant la date du cours.

### Lundi 3 décembre

#### Contenu du cours

- Introduction au système d'aligneur fonctionnel et d'aligneur classique
- Avantages du fonctionnel
- Présentation du portail internet Freearch

Nombre de participants : .....

Nom du docteur : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Tél. : .....

Mail. : .....

# Orthodeal

[www.orthodeal.com](http://www.orthodeal.com)

Tél : 01 47 82 09 48

Fax : 01 57 67 68 51

[info@orthodeal.com](mailto:info@orthodeal.com)

Siège : 44, Chemin du Château d'eau  
38200 SEYSSUEL

Logistique : 179, terrasse de l'Université  
92000 Nanterre

## Notre équipe commerciale à votre service

- Ile-de-France

06 99 63 38 18

- Grand Ouest

Thomas Madec : 06 98 99 44 06

- Rhône Alpes

Sandrine Ortega : 07 62 54 47 19

- Sud

Magali Walter : 06 98 28 44 05

- Nord et Est

Xavier Castille : 06 98 81 44 01

- France

Education Fonctionnelle Myobrace

Geraldine Loison : 07 61 93 15 62